
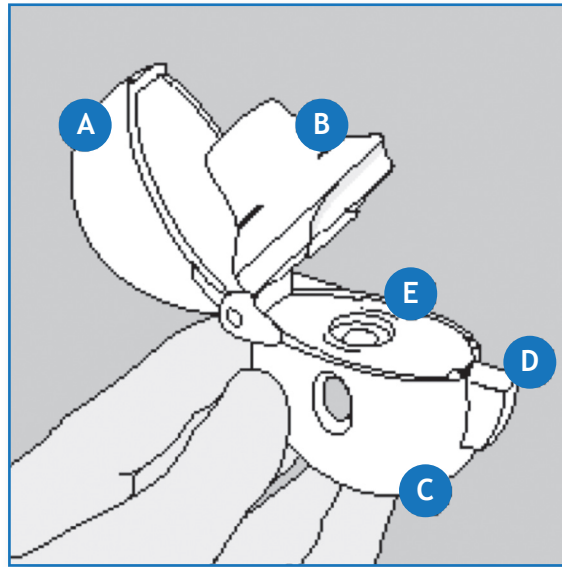
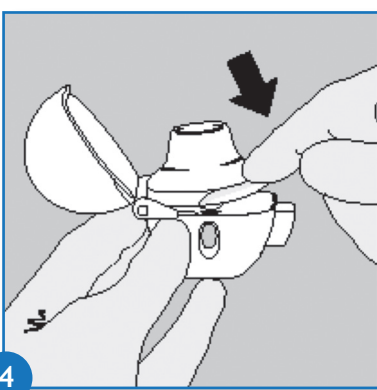
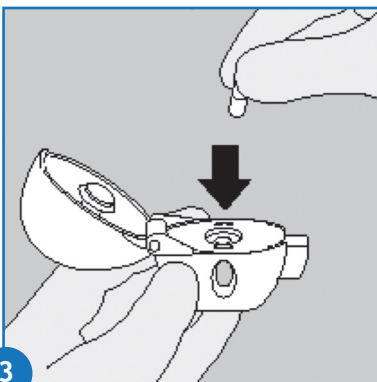
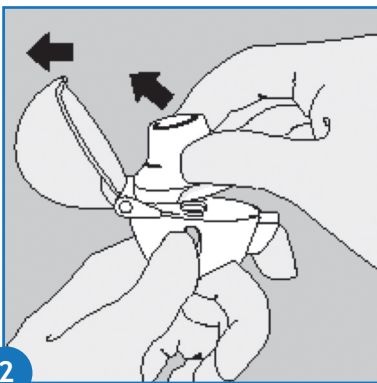
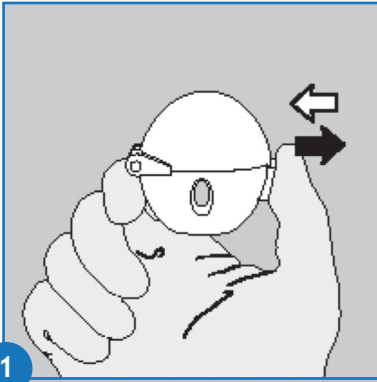


# HANDIHALER


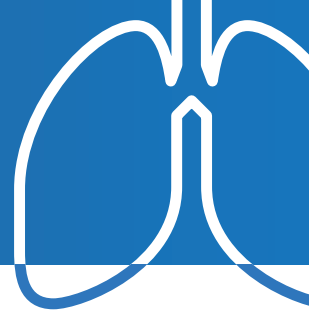


## De HandiHaler


- A. Beschermkap
- B. Mondstuk
- C. Capsulehouder
- D. Drukknop om de capsule te doorprikken (groene knop)
- E. Opening voor de capsule

1. Klap de beschermkap open door de groene knop volledig in te drukken en los te laten.
2. Open de beschermkap volledig door hem naar omhoog te trekken. Klap daarna het mondstuk open door het naar omhoog te trekken.
3. Haal een capsule uit de blisterstrip (doe dit pas vlak vóór het gebruik) en stop ze in de opening (E), zoals staat afgebeeld. Het maakt niet uit welke kant van de capsule naar boven gericht is.
4. Sluit het mondstuk goed, totdat u een klik hoort, en laat de beschermkap open.

# HANDIHALER

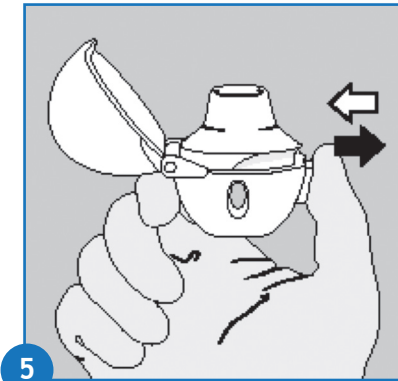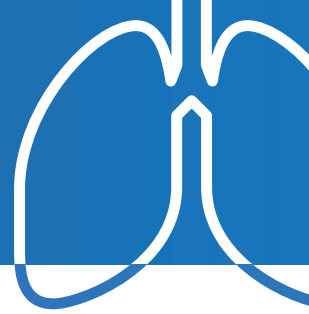


5. Houd het HandiHaler apparaatje verticaal, met het mondstuk naar boven gericht en druk de groene knop in één keer helemaal in. Laat de knop vervolgens weer los. Door het indrukken van de groene knop wordt de capsule doorprikt, zodat het poeder uit de capsule kan vrijkomen tijdens inhalatie.

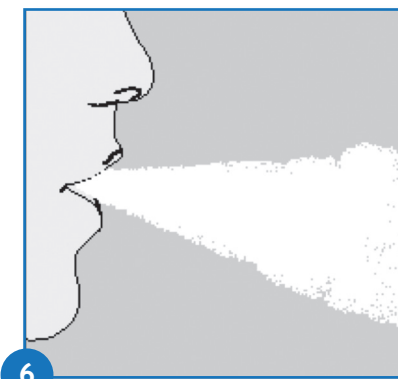


6. Adem volledig uit.

**Belangrijk:** let er bij het uitademen op, dat u nooit in het mondstuk uitademt.

7. Breng na volledige uitademing de HandiHaler naar uw mond en sluit uw lippen stevig rond het mondstuk. Houd uw hoofd rechtop en adem langzaam en diep in, met voldoende kracht zodat u de capsule hoort of voelt trillen. Adem zo diep in dat uw longen volledig gevuld zijn. Houd vervolgens uw adem zo lang mogelijk in en haal de HandiHaler uit uw mond. Adem rustig uit. Adem vervolgens weer normaal. Herhaal nog eenmaal stappen 6 en 7. De capsule is dan volledig leeg.

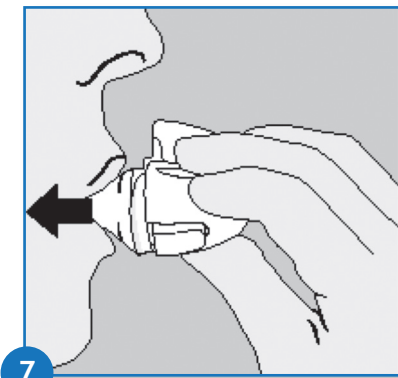

8. Open opnieuw het mondstuk. Tik de gebruikte capsule eruit en gooi ze weg. Sluit het mondstuk en de beschermkap en berg uw HandiHaler apparaatje op.

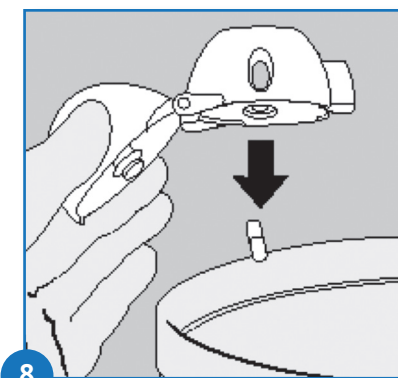

## Reinigen van de Handihaler.

Maak de HandiHaler een keer per maand schoon. Open de beschermkap en het mondstuk. Open vervolgens de capsulehouder door de drukknop op te tillen. Spoel de HandiHaler helemaal uit met warm water om achtergebleven poederresten te verwijderen. Droog de HandiHaler grondig door het achtergebleven water met een papieren servetje te verwijderen.

Laat de HandiHaler vervolgens aan de lucht drogen en laat daarbij de beschermkap, mondstuk en de capsulehouder open. Het duurt ongeveer 24 uur voordat de HandiHaler helemaal droog is. Maak hem daarom direct na gebruik schoon, zodat hij klaar is voor uw volgende inhalatie. Zo nodig kan de buitenkant van de HandiHaler met een vochtig doekje worden schoongemaakt.