


AUTOHALER

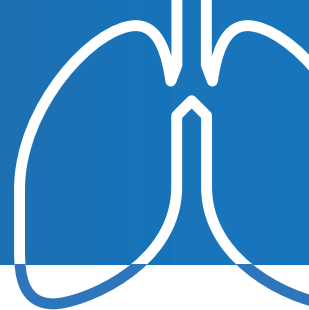


Voor gebruik:

Als u een nieuwe doseeraerosol hebt of als u uw doseeraerosol twee weken of langer niet gebruikt hebt, moet u hem testen voor gebruik. Verwijder daartoe het kapje, plaats de flacon op de goede manier in het plastieken mondstuk en geef twee puffs in de lucht.

Gebruiksaanwijzing:

1. Verwijder het beschermkapje van het mondstuk (afbeelding 1).
2. Adem zo ver mogelijk uit en sluit dan meteen uw lippen stevig om het mondstuk (afbeelding 3,4).
3. Adem langzaam en diep in door het mondstuk. Stop niet met inademen wanneer u een lichte klik hoort, deze geeft alleen aan dat de dosis afgegeven is, en ga door met inademen tot uw longen vol zijn.
4. Houd uw adem gedurende 10 seconden vast en adem langzaam uit. De hefboom moet na elk pufje weer in de horizontale stand gebracht worden. Wanneer uw arts meer dan één dosis voorgeschreven heeft, dient u stap 2-4 te herhalen. Na gebruik dient het beschermkapje teruggeplaatst te worden op het mondstuk.

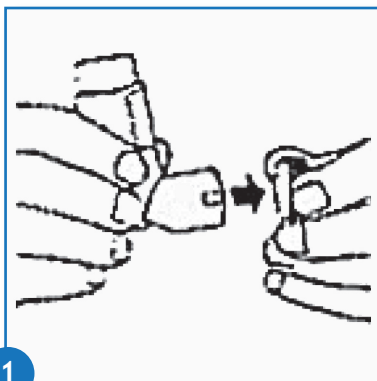

Bijsluiter Qyar Autohaler. Deze tekst werd integraal en zonder wijzigingen overgenomen van de desbetreffende bijsluiter. De lay-out werd aangepast door de Chiesi Foundation. De inhoud van dit document is volledig conform aan de officiële wetenschappelijke bijsluiter van het product, zoals door het verantwoordelijk farmaceutisch bedrijf overhandigd aan de autoriteiten.