


TURBOHALER

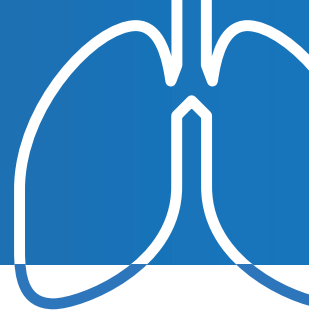

Volg de volgende richtlijnen iedere keer dat u een inhalatie neemt.

1. Schroef het deksel los en verwijder het. Het is mogelijk dat u een ratelend geluid hoort.
2. Houd uw Turbohaler inhalator goed recht met het rode wieltje naar beneden.
3. Houd de inhalator niet vast bij het mondstuk wanneer u uw Turbohaler inhalator laadt. Om de Turbohaler inhalator met een dosis te laden, draait u het rode wieltje zo ver u kan in een richting. Vervolgens draait u het zo ver mogelijk in de andere richting (het is niet van belang in welke richting u eerst draait). U moet dan een “klik” horen. Uw Turbohaler inhalator is nu opgeladen en gebruiksklaar. Laad uw Turbohaler inhalator enkel als u hem nodig heeft.
4. Houd uw Turbohaler inhalator weg van uw mond. Adem zachtjes uit (zo lang als comfortabel is). U mag niet uitademen doorheen uw Turbohaler inhalator.
5. Plaats het mondstuk zachtjes tussen uw tanden. Sluit uw lippen. Adem zo krachtig en diep als mogelijk in door uw mond. Kauw of bijt niet op het mondstuk.
6. Neem de Turbohaler inhalator uit uw mond. Adem zachtjes uit. De geïnhaleerde hoeveelheid geneesmiddel is zeer gering. Daarom is het mogelijk dat u na inhalatie hiervan niets proeft. Nochtans kan u er zeker van zijn dat u de dosis hebt ingeademd als u de richtlijnen hebt gevolgd en dat het geneesmiddel nu in uw longen terecht is gekomen.
7. Indien u een tweede inhalatie moet innemen, herhaal dan stappen 2 tot 6.
8. Schroef het deksel stevig vast na gebruik.
9. Spoel de mond met water na uw dagelijkse doses 's morgens en/of 's avonds, en spuw het uit. Probeer het mondstuk niet te verwijderen of het onnodig te draaien; het is vastgemaakt aan de Turbohaler inhalator en mag niet verwijderd worden. Gebruik de Turbohaler inhalator niet als hij beschadigd is of als het mondstuk losgekomen.

Zoals bij alle inhalatoren, dienen de verzorgers er zeker van te zijn dat kinderen die Turbohaler voorgeschreven krijgen, de juiste inhalatietechniek gebruiken, zoals hierboven is beschreven.

Reiniging van uw Turbohaler inhalator.

Wrijf de buitenkant van het mondstuk eenmaal per week schoon met een droge doek. Gebruik geen water of vloeistoffen.

Bijsluiter Symbicort Turbohaler. Deze tekst werd integraal en zonder wijzigingen overgenomen van de desbetreffende bijsluiter. De lay-out werd aangepast door de Chiesi Foundation. De inhoud van dit document is volledig conform aan de officiële wetenschappelijke bijsluiter van het product, zoals door het verantwoordelijk farmaceutisch bedrijf overhandigd aan de autoriteiten.

